



MASTER RELAX

MR-1398

МАССАЖНОЕ КРЕСЛО



**A SINGAPORE
Branded Product**

Инструкция пользователя

Авторское право

Все права защищены. Никакая часть из содержания этого документа, или его полное содержание, не может быть воспроизведено, передано, переведено, и сохранено на любом языке или компьютере, на любой форме или каким-либо другим способом без предварительного письменного разрешения компании OTO Bodycare Singapore.

СОДЕРЖАНИЕ

Вступление.....	2
Меры безопасности.....	3
Составные части.....	6
Подготовка к эксплуатации.....	7
Пульт и панель управления.....	8
Подключение MP3-плеера.....	12
Устранение проблем.....	13
Хранение и обслуживание.....	14
Спецификация.....	15
Гарантийный сертификат.....	16
Гарантийные обязательства.....	17
О торговой марке OTO Bodycare.....	18
Сертификат РОСТЕСТ.....	19
Новые товары OTO.....	20



ВСТУПЛЕНИЕ

Компания ОТО Bodycare Singapore благодарит Вас за приобретение массажного кресла Master Relax MR-1398 и надеется на получение Вами только положительных эмоций от его использования. Массажное кресло ОТО Master Relax уже прошло проверку и отвечает требованиям безопасности и качества для его использования в домашних условиях.

Пожалуйста перед использованием массажного кресла внимательно прочитайте эту инструкцию, чтобы знать, как правильно его эксплуатировать.

Просим Вас также уделить большое внимание важным предупреждениям по безопасному использованию массажного кресла и сохранить данную инструкцию по эксплуатации для будущего обращения к ней в случае возникновения вопросов.

Примечание: Компания ОТО Bodycare Singapore сохраняет за собой право изменять конструкцию и описание этого массажного кресла без предварительного уведомления. Для правильного использования данного массажного кресла, пожалуйста читайте приложенную к нему инструкцию по эксплуатации.



2

MASTER RELAX
MR-1398

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Пожалуйста, внимательно прочитайте этот раздел перед использованием, чтобы знать о правильном использовании и безопасной эксплуатации массажного кресла.

Предостережения и рекомендации, приведенные ниже, необходимы для правильного использования массажного кресла и для предотвращения опасности или ущерба для пользователя или других людей.

После прочтения данной инструкции, пожалуйста, сохраняйте ее под рукой для удобства, в случае возникновения дополнительных вопросов.

1. Следующим лицам требуется проконсультироваться со своим врачом перед использованием массажного кресла.

- Если у вас встроен кардиостимулятор или аналогичное имплантированное медицинское оборудование
- Если Вы страдаете от болезней сердца
- Если у вас искривление позвоночника
- Если у вас слабые или переломанные кости, особенно кости спины
- В послеоперационный период
- Во время беременности или сразу после родов
- Если у вас злокачественная опухоль
- Если у вас остеопороз
- Если у вас есть проблемы с циркуляцией крови или тромбоз
- Если у вас есть кожные инфекции
- Если вы проходите курс лечения или медицинское обследование
- Если у вас имеются физические аномалии
- Если у вас были в прошлом травмы или заболевания спины и позвоночника, в результате несчастного случая или болезни.

2. Не допускайте попадания воды на поверхность или внутрь массажного кресла.

3. Убедитесь, что вилка электропитания надежно вставлена в розетку, чтобы уменьшить риск короткого замыкания и возгорания.

4. Всегда отключайте массажное кресло из розетки сразу же после его использования или перед его чисткой.



5. Если кабель питания или штепсельная вилка массажного кресла повреждены, пожалуйста прекратите эксплуатацию массажного кресла.
6. Для предотвращения опасности поражения электрическим током, не открывайте заднюю крышку массажного кресла.
7. Это массажное кресло не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, если они не будут обучены и проинструктированы по вопросам использования кресла со стороны лиц, ответственных за их безопасность.
8. Это массажное кресло не предназначено для использования детьми без присмотра взрослых. Не допускайте чтобы дети играли на кресле.
9. Не используйте кресло в помещениях с высокой влажностью воздуха, например в сауне или парной.
10. Не используйте массажное кресло вне закрытого помещения и избегайте попадания на него прямых солнечных лучей.
11. Если произошло общее отключение электричества, переведите выключатель питания в положение ВЫКЛ и отсоедините вилку питания из розетки. Это необходимо сделать для предотвращения поломки кресла при включении общего электропитания снова.
12. Никогда не трогайте вилку сетевого шнура мокрыми руками.
13. Не оставляйте кресло без присмотра, если оно используется в помещении где присутствуют дети или инвалиды.
14. Массажное кресло может использоваться не более одним человеком одновременно.
15. Используйте массажное кресло только по назначению, как указано в инструкции по эксплуатации.
16. Не пытайтесь стоять или сидеть на спинке кресла, подлокотнике или подставке для ног, для предотвращения поломок, травм или других неисправностей кресла.
17. Не наносите на спину или поверхность кресла медицинские или косметические крема или лосьен во время его использования.
18. Всегда содержите массажное кресло в чистоте и не вставляйте посторонние предметы внутрь массажного кресла. Также не оставляйте посторонние предметы на массажном кресле.



19. Не пытайтесь передвинуть массажное кресло, потянув за шнур питания.
20. Перед включением кресла убедитесь, что сзади кресла нет детей, домашних животных или других препятствий.
21. Если Вы обнаружили какие-либо разрывы или повреждения обивки кресла, свяжитесь с Сервисной службой ОТО для консультации.
22. Это массажное кресло предназначено для домашнего использования и не должно использоваться для других целей
23. Если Вы испытываете дискомфорт или боль во время использования массажного кресла, немедленно прекратите массаж и обратитесь к врачу.
24. Никогда не подвергайте массажу опухшие или воспаленные части тела.
25. Не используйте массажное кресло более чем 30 минут за сеанс.
26. Не используйте массажное кресло в помещениях с большой концентрацией испарений газов и аэрозолей, а также с низким содержанием кислорода
27. Это массажное кресло не является медицинским оборудованием и не может полностью заменить полноценного медицинского лечения.
28. Если шнур питания поврежден, он должен быть незамедлительно заменен на аналогичный шнур питания поставляемый изготовителем, через его Сервисную службу или другого уполномоченного Сервисной службой квалифицированного специалиста, во избежание травм и неисправностей.
29. Не допускайте превышения нагрузки на массажное кресло.
30. Не сгибайте, не растягивайте, не скручивайте шнур питания. Избегайте попадания шнура под тяжелые предметы или защемления его между объектами во время передвижения массажного кресла.
31. Снимите обувь и ювелирные украшения перед использованием массажного кресла.

Электромагнитные поля (ЭМП)

Это массажное кресло соответствует всем стандартам по электромагнитным полям (ЭМП). При правильном обращении согласно инструкции, приведенной в руководстве пользователя, кресло является безопасным для использования основываясь на научных данных, полученных на сегодняшний день.



СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ

Массажное кресло:

- A. Спинка
- B. Пульт управления
- C. Громкоговорители
- D. Гнездо для MP3 плеера
- E. Регулятор угла наклона спинки



Подставка для ног:

- A. Переключатель ВКЛ/ВЫКЛ
- B. Пульт управления
- C. Панель управления



ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

При установке кресла, убедитесь в следующем:

- За спинкой кресла не должно находиться предметов, которые будут препятствовать его опусканию.
- Должно быть крайней мере 50 см свободного пространства за спинкой кресла.



- Во избежании повреждения пола, устанавливайте массажное кресло на коврик или половик.



ПУЛЬТ И ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Массажное кресло.

A. Power (Кнопка управления Старт / Стоп)

Останавливает или начинает массаж.

После включения массажа автоматический таймер выключит кресло после 15 минут.

B. Music Sync (Музыкальная синхронизация)

Массаж выполняется синхронно с музыкой. Массажное кресло автоматически комбинирует функции массажа синхронно с ритмом и громкостью музыки, воспроизводимой через MP3 плеер.

C. Full Back (Вся спина)

Начинает массаж вдоль всей спины, автоматически комбинируя все виды массажа. Эта программа включает в себя разминающий, раскатывающий, постукивающий и Шиатцу массаж. Для полноты воздействия на все тело, в области сиденья периодически включается вибрационный массаж.

D. Lower Back (Нижняя часть спины)


Начинает массаж нижней части спины, автоматически комбинируя все виды массажа.

Эта программа включает в себя разминающий, раскатывающий, постукивающий и Шиатцу массаж. Дополнительно в области сиденья периодически включается вибрационный массаж.

E. Upper Back (Верхняя часть спины)

Начинает массаж верхней части спины, автоматически комбинируя все виды массажа.

Эта программа включает в себя разминающий, раскатывающий, постукивающий и Шиатцу массаж. Дополнительно в области сиденья периодически включается вибрационный массаж.

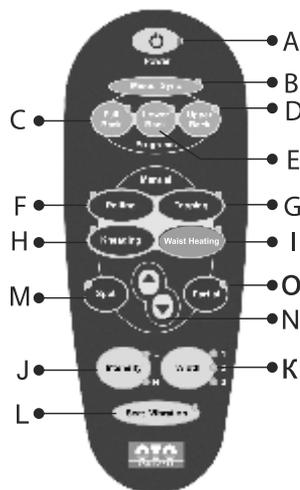

F. Rolling (Раскатывающий массаж)

Начинает раскатывающий массаж, в котором массажные ролики мягко и плавно передвигаются вдоль спины вверх и вниз, обеспечивая полноценное расслабляющее и успокаивающее воздействие. Дополнительно в области сиденья периодически включается вибрационный массаж.

G. Tapping (Постукивающий массаж)

Начинает постукивающий массаж, в котором массажные ролики направлено воздействуют на акупунктурные точки спины, снимая боль, ломоту и напряжение. По умолчанию установлена область массажа “Вдоль всей спины” со “Слабой” интенсивностью. Вы можете поменять эти установки по своему усмотрению. Эта функция может дополнительно включать вибрационный массаж в области сиденья.

H. Kneading (Разминающий массаж)

Начинает разминающий массаж, в котором массажные ролики имитируют разминающее воздействие рук массажиста, предоставляя Вам максимально комфортный массаж.

По умолчанию установлена область массажа “Вдоль всей спины” со “Слабой” интенсивностью. Вы можете поменять эти установки по своему усмотрению. Эта функция может дополнительно включать вибрационный массаж в области сиденья.

I. Waist Heating (Функция обогрева поясницы)

Включает функцию обогрева в области поясницы и нижней части спины, которая дополнительно улучшает кровообращение и снимает боли в процессе выполнения массажных программ.

J. Intensity (Интенсивность)

Настройка интенсивности для всех видов массажа от “Слабой” до “Сильной”. Вы можете менять интенсивность в процессе массажа по своему усмотрению.

K. Width (Ширина)

Настройка ширины размещения массажных роликов от “Широкой”, до “Средней” и “Узкой”. Вы можете менять ширину по своему усмотрению.

L. Seat Vibration (Вибрационный массаж сиденья)

Включает функцию вибрационного массажа сиденья вместе с другими функциями массажа спины.

При работе программы Music Sync, функция вибрационного массажа включена автоматически. Если Вы хотите выключить эту функцию, нажмите кнопку Seat Vibration один раз. Повторное нажатие возобновляет вибрацию.

M. Spot (Массаж определенного места спины)

Эта функция позволяет пользователю сфокусировать массаж на определенном месте, которое выбирается с помощью кнопок ВВЕРХ и ВНИЗ. С помощью кнопок ВВЕРХ и ВНИЗ Вы устанавливаете массажные ролики месте, где требуется выполнение массажа.



N. Up and Down (Вверх и вниз)

Эти кнопки могут использоваться только в режимах "SPOT" и "PARTIAL" массажа для настройки предпочитаемого места или зоны выполнения массажа.

O. Partial (Массаж определенной зоны спины)

Эта функция позволяет пользователю сфокусировать массаж на определенной зоне спины, которая выбирается с помощью кнопок ВВЕРХ и ВНИЗ. С помощью кнопок ВВЕРХ и ВНИЗ Вы устанавливаете массажные ролики в место, где требуется выполнение массажа. Массаж будет выполняться в диапазоне 10 см от выбранного места. Эта функция работает для всех видов массажа.

P. Music button (Кнопка Музыка)

Эта кнопка активирует подключение музыкального плеера к массажному креслу. Для отключения этой функции нажмите кнопку еще раз.



10

ПУЛЬТ И ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Подставка для ног.

AUTO (Автоматическая программа)

Начинает автоматическую программу, которая включает функцию свинг машины и компрессионный массаж для икр ног.

В течении выполнения автопрограммы, свинг функция включается периодически.

SWING (Свинг функция)

Начинает только одно свинг раскачивание.

Вы можете дополнительно включить функцию компрессионного массажа SQUEEZE, которая будет воздействовать одновременно с SWING.

SQUEEZE (Компрессионный массаж)


Начинает только компрессионный массаж.

Вы можете дополнительно включить функцию SWING, которая будет воздействовать одновременно с SQUEEZE.



D. HIGH/MIDDLE/LOW

(Высокий/Средний/Низкий)

Эта кнопка позволяет регулировать скорость раскачивания функции SWING и интенсивность компрессии для икр.

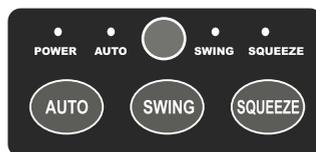

ПОДКЛЮЧЕНИЕ MP3-ПЛЕЕРА

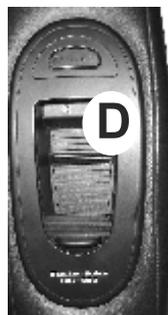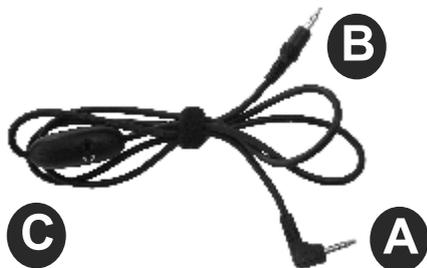


- A. Штекер подключения к креслу
- B. Штекер подключения к MP3-плееру
- C. Штекер подключения наушников
- D. Гнездо подключения MP3-плеера в кресле

Порядок установки.


Штекер подключения к креслу (A) вставьте в гнездо в кресле (D) (Рисунок 1).

Штекер подключения к MP3 плееру (B) вставьте в гнездо MP3 плеера (Рисунок 2).

* Обратите внимание, что ОТО Master Relax MR-1398 не поставляется с MP3-плеером.

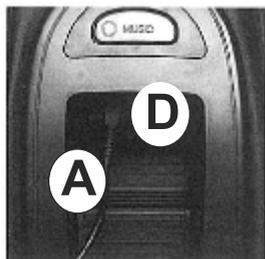

(Рисунок 1)

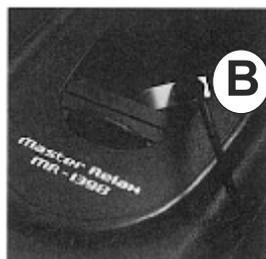

(Рисунок 2)

Кнопка Music (Музыка)

Соедините MP3-плеер, наушники и кресло, как показано выше. Включите плеер, нажав кнопку музыки Music. Отсоедините наушники, чтобы воспроизведение музыки происходило через громкоговорители в спинке кресла. Если наушники подключены, музыка будет воспроизводиться через них.



УСТРАНЕНИЕ ПРОБЛЕМ

Эта глава посвящена общим проблемам, с которыми Вы можете столкнуться при эксплуатации массажного кресла. Если Вы не смогли решить проблему используя предоставленную ниже информацию, обратитесь в сервисный центр ОТО Bodyscare или к его авторизованным дилерам.

Если возникшая проблема не перечислена ниже, пожалуйста, сначала попробуйте выполнить следующие действия:

1. Выключите массажное кресло и отключите вилку из розетки.
2. Подождите 60 минут.
3. Подсоедините кресло к сети и включите его.

Если проблема все еще существует, пожалуйста, свяжитесь с ОТО.

Проблема	Возможная причина	Решение
Массажное кресло не работает и не выполняет массаж.	Кресло не подключено к питанию.	Убедитесь, что вилка плотно вставлена в розетку и исправна. Проверьте наличие напряжения в сети.
	Кресло только что закончило 15-минутный массаж и автоматически переключается в режим ожидания.	Если вы хотите продолжить массаж, нажмите кнопку ON / OFF еще раз.
	Вы использовали кресло непрерывно в течение 45 минут, в результате чего сработала защита от перегрева и выключило кресло.	Выключите кресло и дайте ему остыть в течение 60 минут, прежде чем использовать его снова.
	Избыточная нагрузка на кресло (например, кто-то встал на кресло, или на него положили тяжелый предмет).	Выключите кресло и удалите избыточную нагрузку. После этого снова включите кресло.
Кресло сильно нагрелось.	Вы использовали кресло непрерывно в течение 45 минут.	Выключите кресло и дайте ему остыть. Всегда вынимайте вилку из розетки после использования массажного кресла.
Во время массажа прослушивается звук работающих механизмов.	Этот звук вызван работой механизмов массажного кресла.	Прослушивание звука механизмов вполне нормально и не означает, что массажное кресло неисправно.



ХРАНЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для длительного использования массажного кресла и его исправной работы, пожалуйста руководствуйтесь ниже представленными правилами хранения и обслуживания:

1. Массажное кресло должно обслуживаться и ремонтироваться только квалифицированным персоналом. Разборка или ремонт массажного кресла обычным пользователем запрещена.
2. Не забывайте вынимать вилку из розетки после использования массажного кресла.
3. Не используйте массажное кресло если розетка неисправна.
4. Если кресло не используется длительное время, пожалуйста сверните провод питания и храните кресло в сухом и не пыльном месте.
5. Не допускайте установку кресла в места с высокой температурой или возле открытого огня. Избегайте попадания на кресло прямого солнечного света.
6. Протирайте кресло сухой чистой тканью. Не используйте при чистке обивки кресла жидкости на основе бензина или спирта.
7. Механические компоненты кресла специально сконструированы так, что не требуют специального обслуживания.
8. Не толкайте массажное кресло, пытаесь его передвинуть.
9. Не передвигайте массажное кресло с подключенным проводом электропитания, он должен быть вынут из розетки и скручен.
10. Не устанавливайте кресло на неровную поверхность. Кресло может упасть и привести к травмам.
11. Используйте кресло с перерывами в работе. Не допускайте работу кресла непрерывно долгое время.
12. Не допускайте попадания внутрь кресла воды и других жидкостей.

Если кресло повреждено, прекратите его использование и обратитесь за консультацией в сервисный центр ОТО Bodyscare или к его авторизованному дилерам.

Если у вас возникли вопросы по работе массажного кресла, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к вашему представителю компании ОТО. Контактную информацию Вы можете найти на сайте www.otobodyscare.ru.



СПЕЦИФИКАЦИЯ КРЕСЛА

Наименование	Технические характеристики	
Наименование	ОТО Master Relax	ОТО Ottoman
Модель	MR-1398	OT-1398
Тип	Массажное кресло	Подставка для ног
Напряжение питания	~220-240 В, 50 / 60 Гц	~220-240 В, 50 / 60 Гц
Максимальная мощность	150 Вт	40 Вт
Габаритные размеры в режиме ожидания	90 (Д) x 75,5 (Ш) x 100 (В) см	-
Габаритные размеры в разложенном состоянии	140 (Д) x 75,5 (Ш) x 70 (В) см	-
Габаритные размеры в упаковке	104 (Д) x 77 (Ш) x 75 (В) см	60 (Д) x 40 (Ш) x 48 (В) см
Автоматический таймер	15 минут	-
Вес (Нетто / Брутто)	40 / 48,5 кг	21 / 23,5 кг
Сертификат соответствия РСТ	РОСС.SG.AB52.B13737	
Сертификат качества ISO 9001:2008		



MASTER RELAX
MR-1398

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Наименование изделия: ОТО Master Relax MR-1398

Страна происхождения: Сингапур

Серийный номер: _____

Дата покупки: «__» _____ 20__ г.

Подпись продавца: _____

Место продажи: _____ М. П.

ГАРАНТИЙНАЯ МАСТЕРСКАЯ

Обращайтесь к официальному представителю компании «ОТО Bodycare» в вашем регионе или сервисный центр.

Сервисный центр «ОТО Bodycare»

140003, Московская обл., г. Люберцы, ул. Почтовое отделение 3, д. 59а

тел. 8-495-789-91-77 e-mail: info@otobodycare.ru web: www.otobodycare.ru

СВЕДЕНИЯ О ПОКУПАТЕЛЕ

Ф.И.О. покупателя: _____

Адрес покупателя: _____

Подтверждаю получение исправного изделия в рабочем состоянии. Претензий по внешнему виду изделия не имею, с условиями гарантии ознакомлен.

Подпись покупателя: _____



ГАРАНТИЙНЫЙ СЕРТИФИКАТ

Уважаемый покупатель, благодарим Вас за лучший выбор!

Товары для здоровья сингапурской компании «OTO Bodyscare» имеют Сертификат Соответствия и одобрены для использования РОСТЕСТ. Мы гарантируем высокое качество и безупречное функционирование приобретенного Вами изделия при соблюдении правил его эксплуатации.

Увеличенный срок гарантии равен 36 месяцев со дня покупки.

В течении гарантийного срока компания «OTO Bodyscare» берет на себя обязательства по бесплатному устранению всех неисправностей, возникших по вине завода-производителя, при соблюдении правил эксплуатации, изложенных в инструкции по эксплуатации.

В случае, если Ваш товар по каким-либо причинам Вам не подходит. Вы можете его вернуть или обменять в 14-дневный срок при условии сохранения рабочего состояния, товарного вида, упаковки и документов.

Условия увеличенной гарантии:

1. Настоящая гарантия имеет силу при соблюдении следующих условий:
 - Правильное и четкое заполнение Гарантийного Сертификата;
 - Наличие чека (приходного кассового ордера), содержащего дату покупки.
2. Компания «OTO Bodyscare» оставляет за собой право в отказе от гарантийного обслуживания в случае не предоставления вышеуказанных документов или если информация в них будет неполной, неразборчивой, противоречивой, что вызовет сомнения или затруднения в установлении факта и даты приобретения изделия.
3. Гарантия включает в себя выполнение ремонтных работ и замену неисправных частей.
4. Гарантия не включает в себя периодическое обслуживание.
5. Гарантия не распространяется :
 - На случаи ущерба вызванные неправильной эксплуатацией;
 - На быстро изнашиваемые части (чехол и обивка);
 - На случаи собственной вины покупателя.
6. Не подлежат гарантийному ремонту, а также замене или возврату изделия с дефектами, возникшими вследствие:
 - Механических повреждений;
 - Не соблюдения условий эксплуатации или ошибочных действий владельца, попадания внутрь посторонних предметов, жидкости, насекомых, ремонта или внесения конструктивных изменений не уполномоченными лицами, подключения изделия к питанию не соответствующего Государственным Техническим Стандартам.
7. Настоящая гарантия не ущемляет законных прав потребителя, предоставленных Вам действующим законодательством РФ.
8. В случае наличия исправления, гарантийный талон считается недействительным.



О торговой марке OTO Bodyscare

Слияние знаний Востока и технологий Запада

Уже более чем 20 лет компания ОТО создает инновационные продукты для здоровья и постоянно совершенствует свои знания в этой области. Итогом многолетней работы является продукция компании, в которой сбалансированы традиционные знания Востока и революционные технологии Запада.

Основным направлением деятельности компании ОТО является производство товаров, помогающих людям жить лучше и дольше. Товары ОТО для фитнеса и отдыха поддерживают тело в тонусе и помогают его омоложению. Развивая свой бизнес, ОТО стремится стать народной маркой, выпуская общедоступные товары.

ОТО в 21 веке - это международная компания, имеющая свои представительства в Сингапуре, Малайзии, Гонк-Конге, России и Европе. Торговая сеть ОТО охватывает сейчас страны Азиатско-Тихоокеанского региона - Индонезию, Таиланд, Филиппины, Брунею, Индию, Австралию и Новую Зеландию.

Подтверждением высокого качества продукции ОТО является увеличенный гарантийный срок 36 месяцев и сертификат качества ISO 9001.

Новая линейка массажных кресел серии ОТО



OTO CYBER Indulge



OTO CYBER-Pro



OTO CYBER-Plus



СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

PG № РОСС.SG.LAB52.B13737
Срок действия с 26.11.2010 по 25.11.2013
№ 0394645

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № РОСС RU.0001.11AB52.
ОС "Межрегиональная Сертификационная Компания",
125167, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 52, тел. (499)9221920, факс (499)9221920.

ПРОДУКЦИЯ Кресла массажные, имеющие встроенные вибромассажные устройства, мод.: CX-1900, CX-2900, CP-2500, MR-1390, MR-1398, CD-1880, CZ-3000.
Серийный выпуск. код ОК 005 (ОКП): 51 5656

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ Р 52161.2.32-2008, ГОСТ Р 51318.14.1-2006, ГОСТ Р 51318.14.2-2006, ГОСТ Р 51317.3.2-2006, ГОСТ Р 51317.3.3-2008 код ТН ВЭД, Россия: 9401 71 000 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ "OTO Bodycare Pte Ltd.". Адрес: Aljunied Road, #04-01, Aljunied Industrial Complex, 389836, Сингапур.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН "OTO Bodycare Pte Ltd.". Адрес: Aljunied Road, #04-01, Aljunied Industrial Complex, 389836, Сингапур. Телефон +65 67453381.

НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний №Л.2119/6026/02-2010 от 24.11.2010г.
Испытательная лаборатория "ТЕХПРОММАШ", рег. № РОСС RU.0001.21AB19 от 15.04.2010, адрес: 125212, Москва, Головинское ш., 5, стр. 2

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Маркирование знаком соответствия по ГОСТ Р 50460-92 производится на потребительской упаковке или в товаросопроводительной документации. Финал завод-изготовитель по приложению (бланк №030R234). Сертификат без приложения не действителен.
Инспекционный контроль один раз в год.
Схема сертификации 3.

Руководитель органа А.Ю. Маргосян А.Ю. Маргосян
Эксперт С.Б. Усов С.Б. Усов

Сертификат имеет юридическую силу на всей территории Российской Федерации



НОВИНКИ ОТО



Ручной массажер ОТО e-THUMPER ET-200

Отличительные особенности:

- Уменьшает напряжение и снимает боли в мышцах;
- Постукивающий массаж улучшает циркуляцию крови и лимфоток;
- Способствует отдыху мышц и повышает их подвижность в области хронического напряжения;
- Улучшает самочувствие и повышает тонус;
- 4 сменные насадки для различных видов массажа;
- 3 уровня регулировки скорости массажа.



Вибромассажный пояс ОТО Trimax TX-908

Отличительные особенности:

- Способствует похудению и расщеплению жиров;
- Улучшает пищеварение и поглощение питательных веществ;
- Способствует более эффективной физиотерапии;
- Обеспечивает тонизирующее воздействие на основные группы мышц;
- Имеет 3 специальные программы для похудения и массажа;
- Имеет 3 вида ремней для различных упражнений;
- Имеет удобные ручки для выполнения массажа на различные участки тела;
- Удобный ЖК информационный дисплей;
- Сумка для переноски в подарок.



Тренажер ОТО FLABeLOS FL-3000

Отличительные особенности:

- Простой в использовании, эргономичный дизайн;
- Доступный светодиодный дисплей управления;
- Широкий диапазон скорости вибрации;
- Дополнительная поддержка икр, которая позволяет тонизировать области нижней части живота и бедер;
- Обеспечивает максимальную амплитуду вертикальной вибрации.



НОВИНКИ ОТО



Массажер головы и глаз OTO e-Solace EH-508

Отличительные особенности:

- Усиливает кровообращение в области головы и глаз;
- Восстанавливает чувствительность области глаз;
- Помогает снизить напряжение глаз и головную боль;
- Повышает концентрацию и улучшает сон;
- Уменьшает темные круги под глазами и отечность вокруг глаз;
- Снимает психическое напряжение и стресс;
- Способствует повышению зрения.

Массажная подушка OTO e-Bliss ES-928C

Отличительные особенности:

- Беспроводной пульт управления с автопрограммой массажа;
- Точечно-роликовый массаж Шиатцу по часовой и против часовой стрелки;
- Надавливающий массаж с тепловой терапией;
- Идеальна для использования дома, на работе или в автомобиле;
- Дополнительная накидка регулирует интенсивность массажа;
- Резиновый ремешок жестко фиксирует подушку на стуле;
- Работает от сети 220 В и авто прикуривателя 12 В.



Массажная накидка OTO e-Lux EL-868

Отличительные особенности:

- Раскатывающий массаж спины снижает нервное напряжение;
- Тепловое воздействие на тело способствует снятию болевых ощущений и расслаблению;
- Точечный Шиатцу массаж улучшает кровоток;
- Возможность настройки массажа Шиатцу для определенной области спины;
- Отдельно выбираемые функции полного массажа спины, массажа верхней или нижней части спины;
- Вибрационный массаж для ваших ягодиц.





625 Aljunied Road #04-01/02,
Aljunied Industrial Complex
Singapore 389836
OTO Careline: (65) 6747 0656
info@otobodycare.com

www.otobodycare.com

**Представительство
OTO Bodycare в России**

140003, Московская обл.,
г. Люберцы, п/о 3, д. 59а
тел: 8 (495) 789-91-77
факс: 8 (495) 983-34-78
e-mail: info@otobodycare.ru

www.otobodycare.ru